



TORRE PARA LAPAROSCOPIA 3 CMOS FULL HD






## Monitor 26" full HD

#### 26 "- modelo FS-P2604D



¡NUEVO! FS-P2604D está diseñado y equipado para manejar tareas en entornos quirúrgicos exigentes. El vidrio frontal al ras con control de interfaz táctil es fácil de limpiar y permite un cambio rápido del procedimiento. Con funciones de compatibilidad incorporadas, FS-P2604D reconoce automáticamente otros equipos quirúrgicos y de diagnóstico altamente especializados que se encuentran en salas de cirugía, quirófanos, salas de emergencias e instalaciones de procedimientos.

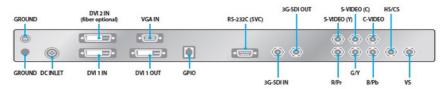

## Cámara unidad + cabezal full HD

#### 3 CHIP HD CAMERA WITH USB





Como todas las cámaras de alta definición de 3 CCD de Tekno; este modelo ofrece una imagen perfecta para todas las diferentes aplicaciones posibles. Debido a los sensores MOS utilizados, las dimensiones del cabezal de la cámara han podido reducirse. A los tres botones en el cabezal de la cámara se le pueden asignar individualmente dos funciones a cada uno, lo que permite una configuración personalizada de la unidad a los usuarios. La unidad memoriza todos los parámetros establecidos. Dos perfiles individuales se pueden almacenar. En combinación con nuestrosinsufladoresFLOW-S, el flujo real de gas se puede visualizar en el monitor. Gracias a un generador de títulos se pueden incorporar textos a las grabaciones de video.

#### Datos técnicos

- Sensor: 3x 1/3" MOS Sensor
- Pixel: 1920 x 1080p Pixel (FULL HD)
- Resolución: > 1000 lineas
- Formato: 16:9
- · Sensibilidad: < 3 Lux
- · Relación señal a ruido: 54 dB
- Shutter: 1/50 hasta 1/10.000 sec.
- · Video salidas
  - Análogo: 1 x RGB / YPbPr, 1 x S-Video (Y/C), 1 x BNC
  - Digital: 1x HDMI / DVI, 2 x HD-SDI
  - Otras: 1x Remote IN / 1x Remote OUT / 1x PS/2
- 3 Botones programables en el cabezal de camára (6 funciones)
- · 3 Reglajes memorizables
- Almacenamiento automático del último reglaje
- Balance de blancos automático
- Cabezal de camára C-Mount sumergible
- Zoom digital (2.5 x)
- Introducción de datos del paciente por generador de textos
- Freeze
- En combinación insufladores Flow S, el flujo de gas puede ser indicado en la pantalla
- Alimentación: 100 240 VAC; 50 60 Hz
- · Consumo eléctrico (max.): 20W
- Dimensiones Cámara (L x A x P): 353 x 103 x 253 mm
- · Dimensiones Cabezal de cámara (Ø; Longitud): Ø 38mm; 81mm
- Peso Camára: aprox. 4.7 kg
- · Peso Cabezal de cámara: aprox. 145g
- Producido y examinado según IEC 601-1; EN 60601-1
- CE marca según: RL 93/42/EWG



## Esterilización cabezal de cámara

- 6. Esterilización: ¡Siga las instrucciones para cada método de esterilización!
- Esterilización con plasma H2O2 (STERRAD ® 100S; VPRO 1 (STERIS))→ Temperatura: 50° C / Tiempo de ciclo: 55 min.
- Atención! ¡Envuelva el cabezal de la cámara en la película Tyvek antes de comenzar la esterilización por plasma!
- 35% esterilización con ácido peracético (Steris 20), Steris System 1→ Temperatura: 54,5° C / Tiempo de ciclo: 35 min.

## **Objetivo**



ISO-FOCAL ZOOM

 $f = 15-35 \, \text{mm}$ 

tk 754-3908



Al cambiar el zoom permanece enfocado. The ISO-focal zoom remains focussed while changing the zoom.



## Fuente de Luz LED



TEKNO LIGHT 3000	300	manual/automatic	tk754-LA300
	Watt	ajuste de luminosidad	

Watt ajuste de luminosida Watt intensity control

Última tecnologia LED con un rendimiento de colores natural. La larga vida útil de los LEDs reduce los gastos de explotación anual a un mínimo. Ajuste de luminosidad manual o automático cuando la fuente de luz está connectada a una cámara. 300W LED corresponden a una fuente clásica de 300W Xenón.

#### Datos técnicos

Lámpara	LED 300 Watt	
<ul> <li>Temperatura de colores</li> </ul>	6.000 - 6.500°K	
Vida útil	> 30.000h	
· Adaptator de cables de luz	Wolf	
<ul> <li>Reglaje de luminosidad</li> </ul>	0 - 100% ajustable	
<ul> <li>Alimentación</li> </ul>	100 - 240 VAC; 50-60 Hz	
<ul> <li>Consumo de potencia</li> </ul>	aprox. 300W	
<ul> <li>Dimensiones (L x A x P)</li> </ul>	355 x 120 x 340 mm	
Peso	aprox. 10 kg	
· Producido y examinado según	IEC 601-1ff, IEC 60601-1ff	
CE marca según	RL 93/42/FWG	

Las fuentes de luz LED vienen despachadas con la conexión Wolf. Conexiones para Olympus, Storz, ACMI y Circon disponible sobre demanda.




## Fibra óptica

Glasfaser-Kaltlichtkabel Fiberoptic cables

Cables de lumière froide Cables de fibra óptica Cavi luce in fibra ottica

autoclavable 134°C / 273°F

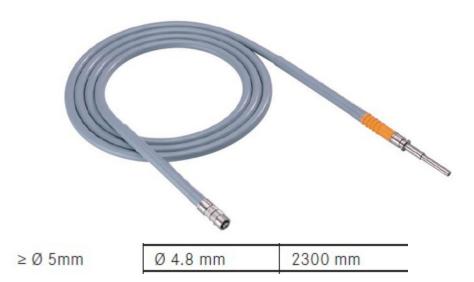





### Insuflador

# Insufflatoren Insufflators

Insufflateurs
Insufladores
Insufflatori



TEKNO FLOW 30S 30 I/min **tk754-1522** 

Insufladores de la serie TEKNO FLOW S son muy sólidos, fiables incorporando una tecnología de punta.

Manejo intuitivo e indicadores de fácil lectura son características de estos insufladores. Además de trabajar con cilindros de gas CO2 de grado médico, es posible la operación a través de un suministro central de gas.

Un programa especial para pre-insuflación, que trabaja con baja insuflación, combinado con alto flujo de gas; trabaja seguro mediante el control continuo de la presión. Asegurando así el más alto nivel de seguridad de los pacientes.

Opcionalmente, los insufladores están disponibles con un sistema de calefacción. Además, el dispositivo tiene un indicador de presión diferencial y un módulo opcional para mostrar los datos de insuflación en la imagen proveniente de la cámara \*(sólo posible en combinación con cámaras seleccionadas TEKNO).

## Sistema filtro externo





## Filtro hidrofóbico



50 tk754-1501

Paquete de (pzas.) Packing unit (pcs.) Filtros estériles para TEKNO FLOW Sterile filter for TEKNO FLOW

## Laparoscopio

Laparoskope Laparoscopes

Laparoscopes Laparoscopios Laparoscopi

autoklavierbar / autoclavable 134°C / 273°F - 18 min.

Ø 10.0 mm - 310 mm


Ø 10.0 mm - 450 mm

Ø 10.0 mm - 540 mm

tk 700-020

tk 700-420

tk 700-430

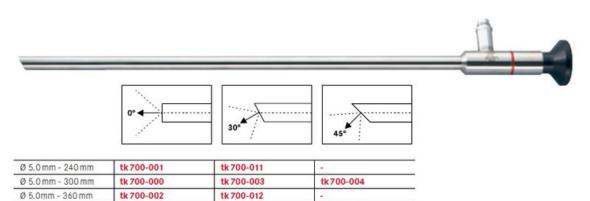

tk 700-024

tk 700-424

tk 700-023

tk 700-423

tk 700-433



## Carro para equipos

- •Lamina de acero inoxidable con pintura electrostática
- Cuatro entrepaños fijos, el segundo con soporte para teclado
- Brazo articulado para monitor de 31"
- Sistema para almacenamiento de cables de corriente y video
- Ruedas grado hospitalario, dos con freno.
- Base para soporte de bala de CO2, con ruedas grado hospitalario y con tapete, ubicada en la parte trasera del carro, con correas de ajuste sujetadas a la altura de la segunda y tercer bandeja con hebillas metálicas (diámetro de la bala 24 cm).
- Transformador de aislamiento oculto en la parte inferior del carro, con cable grado hospitalario de 5 mts.
- Multitomagrado medico de 6 puestos alimentada por el transformador de aislamiento, con switchde encendido central (ubicado en la parte de adelante del carro, en la esquina superior del primer espacio).
- Cajón deslizable en la parte inferior del carro.

